

Внимание

1. Перед началом использования убедитесь в том, что уровень интенсивности работы прибора отрегулирован в соответствии с Вашими индивидуальными потребностями, а также проследите за тем, чтобы был прямой контакт кожи с электродными накладками.
2. Перед массажем убедитесь, что Ваша кожа очищена.
3. Если во время процедуры на коже появились зрительные высыпания, уменьшите интенсивность миостимуляции или прекратите использование аппарата.
4. Прекратите процедуру, если Вы почувствовали дискомфорт и тошноту во время использования пояса.
5. Будьте аккуратны при использовании зарядного устройства: во избежание его поломки не тяните за провода.
6. Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь в официальный сервисный центр Vital Rays.

Технические характеристики

Описание: Массажный пояс с миостимуляцией «Доктор Стройность»

Модель: YS-203

Мощность: DC 3.7V 800 mA

Выходная частота: 1–200 Hz

«Доктор
Стройность»

Массажный пояс с миостимуляцией



«Доктор
Стройность»

Массажный пояс с миостимуляцией



Производство и разработка
ООО «ВИТАЛ РАЙЗ»/ VITAL RAYS, LLC
350012 УЛ. КРУГОВАЯ, 26, г.КРАСНОДАР
350012, KRUGOVAYA STR. 26, KRASNODAR, RUSSIA
Изготовлено в "ZMC HEALTHCARE TECHNOLOGY CO., LIMITED"
RM 20A KIU FU COMM BLDG 300 LOCKHART RD
WAN CHAI HONG KONG

EAC

Инструкция по применению

YS-203

Массажный пояс с миостимуляцией «Доктор Стройность»

Массажный пояс с миостимуляцией «Доктор Стройность» от компании Vital Rays – это достижение медицинской технологии, использующей низкочастотные электрические импульсы, аналогичные действию иглотерапии, применяемой в традиционной китайской медицине. Безопасный ток пропускается через стимулятор с компьютерным управлением и непосредственно воздействует на нервные окончания, расположенные в области талии. Миостимуляция и массаж способствуют сжиганию жира, похудению, улучшению кровообращения, повышению сопротивляемости организма и замедлению старения.

Эффект от использования

Похудение

Массажный пояс с миостимуляцией «Доктор Стройность» стимулирует точки, отвечающие за снижение веса. Он помогает расщепить жир, и Вы избавляетесь от лишнего веса без усилий и каких-либо побочных эффектов.

Выведение токсинов

Токсины вредны для здоровья человека. Они могут проникать в организм из-за загрязнения окружающей среды, неправильного питания или стресса. Стресс приводит к запорам, метеоризму, что способствует проникновению токсинов в кишечник. Токсины вредят иммунной системе и здоровью в целом. Высокоэффективный пояс с миостимуляцией «Доктор Стройность» стимулирует точку Гуань-юань, способствуя выведению токсинов и усвоению питательных веществ.

Массаж

Массаж – это один из традиционных методов лечения, который позволяет устранить мышечное напряжение и судороги в ногах. Также он способствует улучшению кровообращения. Система кровообращения доставляет кровь к каждому органу, лимфатическая система доставляет токсины и шлаки в лимфоузлы для очищения, затем кровь выводит их из организма. Высокоэффективный пояс с миостимуляцией «Доктор Стройность» от компании Vital Rays может стимулировать обе системы и способствовать нормальному крово- и лимфообращению.


Строение пояса



Применение

Перед использованием:

1. извлеките пояс, проденьте эластичный фиксатор через кольцо;
2. проследите за тем, чтобы шесть черных электродных накладок касались кожи талии, затяните пояс.

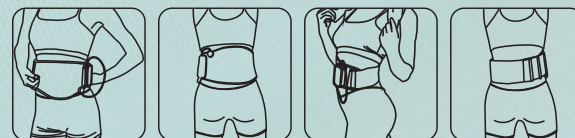

Использование прибора

А) Извлеките пульт дистанционного управления, приведите его в действие длительным нажатием кнопки «Включение»

При включении Вы услышите короткий звуковой сигнал, на экране появится изображение тела человека и индикатор заряда пульта (светло-зеленый индикатор указывает на то, что прибор заряжен полностью, для полной зарядки требуется 2 часа, зарядки хватает на 10 часов).

Б) Установите время (от 5 до 60 минут):

нажмите кнопку + или – возле значка для выбора нужного времени. Увеличение и уменьшение времени процедуры осуществляется по 5 минут (от 5 до 60 минут). Время по умолчанию – 30 минут.

В) Установите интенсивность миостимуляции (уровни от 1 до 32): нажмите кнопку + или – возле значка для выбора нужной интенсивности миостимуляции в диапазоне от 1 до 32. Интенсивность по умолчанию – 1.

Примечание: если при первом использовании у Вас возникло ощущение дискомфорта и «мурашек по коже», не стоит беспокоиться – это нормальная реакция на миостимуляцию.

Г) Установите режим (6 режимов):

режим по умолчанию – 0 (автоматический режим). Всего существует 6 режимов; переход на следующий режим осуществляется автоматически через каждые 5 минут; каждый режим массажа дает Вам разные ощущения. Отключение происходит по истечении 30 минут.

Нажмите кнопку для перехода в ручной режим, а затем выберите с помощью кнопок + и – возле значка один из 6 режимов.

Д) Используйте кнопку для изменения зоны воздействия импульса.

После использования:

1. нажмите и удерживайте 2 секунды красную кнопку , и прибор отключится после звукового сигнала. Если вы не сделаете это, он выключится автоматически через некоторое время;
2. снимите массажный пояс и уберите его в коробку.